

“

Da sempre siamo alla ricerca di **soluzioni tecnologiche** all'avanguardia che aiutino, semplifichino e rendano più piacevole il **Tuo lavoro**.

Uno strumento professionale deve garantire al proprio utilizzatore elevati **standard qualitativi**, ma anche ergonomia e semplicità di utilizzo. Ma cosa succede quando tutto ciò si fonde ad un **design d'autore**?

”



MPF Optimum™

La gamma di pennelli e strumenti **Optimum™**, progettati da **Nondas Vlachopoulos**, sono una rivoluzione nell'industria dei pennelli per la ceramica per laboratori odontotecnici.

Con una struttura bilanciata in alluminio leggero ed un design ergonomico, è di gran lunga il migliore manico per pennelli mai realizzato per la ceramica dentale, e per questo il nome "Optimum". Con le curve aerodinamiche, l'Optimum™ Spring Ceramic Brush si impugna perfettamente nella mano e permette padronanza nella esecuzione del lavoro.

L'attenzione è nei dettagli; il puntale sull'estremità del manico per liberare i perni dei monconi dalla base dei modelli senza dover cambiare strumento, la parte posteriore del manico con il suo design forato funge da piccolo martello per condensare la ceramica... ogni parte è progettata nei minimi dettagli.

La filosofia di MPF Brush Co. è quella di insistere su setole per i pennelli di altissima qualità. La nostra setola Kolinsky, essendo un prodotto naturale, è di gran lunga superiore a qualsiasi setola sintetica che il mercato possa offrire.

Una volta provata questa nuova gamma di pennelli, siamo sicuri che mai più tornerete indietro!



MPF Optimum™ - UOMO

Punta con **attivazione a molla**. Perfettamente bilanciato. Punta sostituibile in premium **Kolinsky** (setola in martora). La spina integrata consente di rimuovere i perni dalla base del modello.



Articolo No. 102-0004

Optimum™ Spring Ceramic Brush,
Misura 4, Arancio

Articolo No. 102-0006

Optimum™ Spring Ceramic Brush,
Misura 6, Champagne

Articolo No. 102-0008

Optimum™ Spring Ceramic Brush,
Misura 8, Blu Notte



Articolo No. 102-2000

Optimum™ Spring 3-in-1 Brush Kit
Arancio



Articolo No. 102-3000

Optimum™ Spring 3-in-1 Brush Kit
Champagne



Articolo No. 102-4000

Optimum™ Spring 3-in-1 Brush Kit
Blu Notte

MPF Optimum™ - DONNA



Articolo No. 103-0004

Optimum™ Ladies Spring Ceramic Brush
Misura 4, Rosa

Articolo No. 103-0006

Optimum™ Ladies Spring Ceramic Brush
Misura 6, Viola

Articolo No. 103-0008

Optimum™ Ladies Spring Ceramic Brush
Misura 8, Blu Notte



Articolo No. 103-1000

Optimum™ Ladies Spring 3-in-1
Brush Kit, Rosa



Articolo No. 103-2000

Optimum™ Ladies Spring 3-in-1
Brush Kit, Viola



Articolo No. 103-3000

Optimum™ Ladies Spring 3-in-1
Brush Kit, Blu Notte

MPF Optimum™ - Master Brushes / Kit & Stand

Tutti gli strumenti necessari in un'unica confezione. Punte sostituibili premium Kolinsky (setola in martora).



Articolo No. 120-5004 Optimum™ Spring Master Kit, Misura 4

Articolo No. 120-5006 Optimum™ Spring Master Kit, Misura 6

Articolo No. 120-5008 Optimum™ Spring Master Kit, Misura 8

Articolo No. 102-0009

Optimum™ Ceramic Brush, Stain

Articolo No. 102-0010

Optimum™ Ceramic Brush, Opaco

Articolo No. 102-0010

Optimum™ Ceramic Brush, Contour

Master Brush Kit

Dotazione: un pennello con molla Spring
Ceramic Brush a vostra scelta misure; 4, 6 o 8.



Articolo No. 104-4000

Optimum™ Instrument Stand da Tavolo

* Pennelli venduti separatamente

MPF Optimum™ - Ceramic Carving, Instruments & Kit

Strumenti di precisione da incisione per ceramica. Perfettamente bilanciati. Punte sostituibili. Impugnatura anatomica.



Articolo No. 104-3000 Optimum™ Carving Instrument Kit (4)

Articolo No. 104-0001

Optimum™ Ceramic Carving
Lama Piatta

Articolo No. 104-0002

Optimum™ Ceramic Carving
Lama Contra

Articolo No. 104-0003

Optimum™ Ceramic Carving
Lama a Croce

Articolo No. 104-0004

Optimum™ Ceramic Carving
Cucchiaio Linguale



Articolo No. 104-2000

Optimum™ Carving Instrument Kit + Stand per gli Strumenti

MPF Signatures Edition ○○○

x Jungo Endo: Stay Close to Nature.
Finissima, solida, punta con attivazione a molla.

Articolo No. 118-0000

Pennello firmato Jungo Endo, Nero

Articolo No. 118-0000


Pennello firmato Jungo Endo, Rosso



x Thomas Singh: White Brush.
Fine, punta con attivazione a molla.

Articolo No. 118-2000

Pennello firmato Thomas Singh

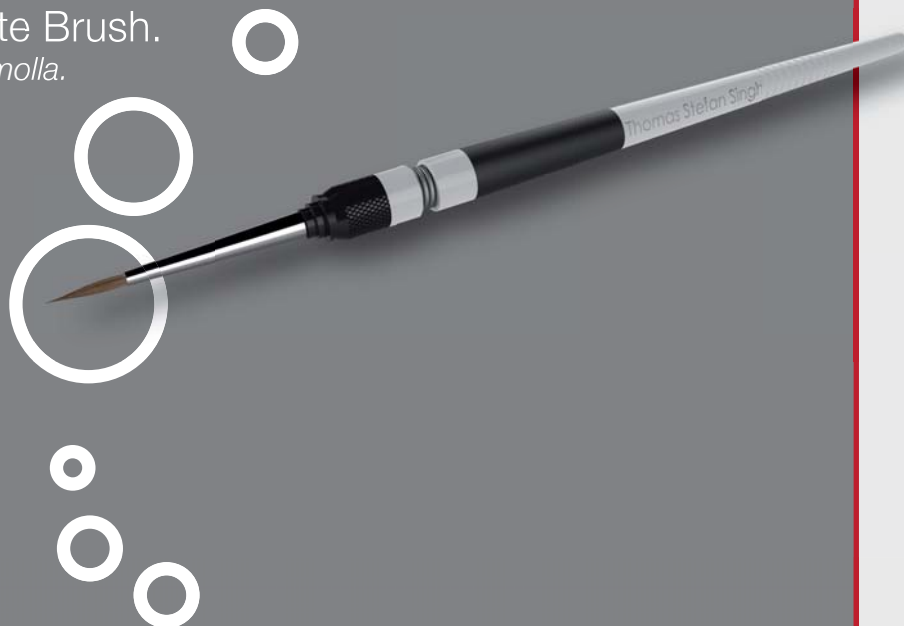

x Joshua Polansky: Scribe Instrument.
Per la naturale tessitura di superficie in ceramica, resina & cera.


Articolo No. 107-0000

Scribe Instrument di Joshua Polansky



MPF Synthesis

L'ultimo nato della nostra gamma è il pratico e conveniente, MPF Synthesis. Un'immancabile nel vostro reparto ceramica poiché fonde la qualità di conservare l'umidità del pelo Kolinsky con la duttilità e notevole durata della setola sintetica, per ottenere il meglio dei due elementi!

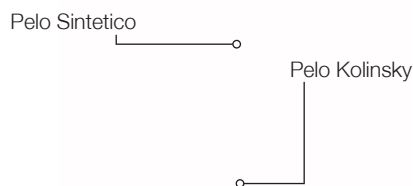

Articolo No. 105-2000
MPF Synthesis, Misura 2

Articolo No. 105-4000
MPF Synthesis, Misura 4

Articolo No. 105-6000
MPF Synthesis, Misura 6

Articolo No. 105-8000
MPF Synthesis, Misura 8

Articolo No. 105-0000
MPF Synthesis 4-in-1
Brush Kit

MPF Evolution - Brushes / Master Brushes & Brush Kits

Impugnatura in alluminio, leggera ed ergonomica. Punta sostituibili in Premium Kolinsky, pelo in martora.



Articolo No. 116-0004
Evolution, Misura 4

Articolo No. 116-0006
Evolution, Misura 6

Articolo No. 116-0008
Evolution, Misura 8

Articolo No. 116-0009
Pennello Stain Evolution

Articolo No. 116-0010
Pennello Glaze Evolution

Articolo No. 116-0011
Pennello Countour Evolution



Articolo No. 116-2004 Kit Evolution Master Brush, Misura 4

Articolo No. 116-2006 Kit Evolution Master Brush, Misura 6

Articolo No. 116-2008 Kit Evolution Master Brush, Misura 8



Articolo No. 104-4000

Optimum™ Instrument Stand da banco
Pennelli venduti separatamente.

MPF Palettes ○○○

Le Piastre sono strumenti utilizzati dal ceramista tutti i giorni, rappresentano un apparato indispensabile per il laboratorio odontotecnico.

Dovrebbero essere funzionali, progettate per garantire la massima produttività e avere un look gradevole; dopo tutto, il tecnico probabilmente le osserverà per una buona parte della giornata lavorativa!

Le piastre di nostra produzione hanno un design elegante e ricercato nei minimi dettagli.

L'ultima nata, l'MPF Comp Tray è un metodo per preservare il materiale composito in un contenitore ben fatto. Ha una superficie di lavoro antiscivolo, una tavolozza per gli stain fatta in silicone anti-aderente e la spugna rimpiazzabile. Siamo molto orgogliosi di poter offrire questa innovazione ai laboratori di tutto il mondo.

La Ceramic Palette offre l'opzione di entrambe le superfici di lavoro, di marmo o di vetro, con tecniche di umidificazione uniche in base al tipo di superfici.

La Stain / Opaque Palette studiata per permettere un facile accesso ai prodotti, è studiata per evitare la scissione e l'asciugatura dei materiali.

L'Evolution ha una forma elegante e un design ergonomico. Un tocco morbido ed è di facile uso, permette un semplice accesso ai materiali e alla superficie di lavoro.

Ultima della serie, ma comunque importante è la CAD Artistry Mixing Palette, creata per offrire la soluzione definitiva a coloro che utilizzano la tecnologia CAD-CAM.

Alla MPF Brush Co., abbiamo fissato dei nuovi standard di riferimento per migliorare la funzionalità ed il design nelle piastre per ceramica!



MPF Marble Ceramic Palette


Superficie in marmo italiano con un rivestimento in nylon. Base durevole. Mantiene umido l'impasto di ceramica per capillarità.

Articolo No. 115-1000

Marble Ceramic Palette

Dotazione: una piastra, due rivestimenti in nylon e una bottiglia di plastica per l'acqua.

Il modello esclusivo di marmo, permette ad una quantità regolata di acqua, di inumidire il rivestimento e questo per garantire un impasto ceramico consistente e lavorabile. Il nylon a contatto con la punta in pelo naturale Kolinsky e più delicato ed aiuta a fare durare la punta, anche la più fine, per molto tempo.

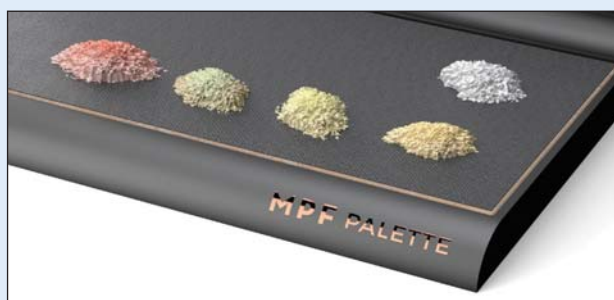

Articolo No. 115-1001

Rivestimento in Nylon, 2/pk



Articolo No. 115-1002

Marmo di ricambio

MPF Glass Ceramic Palette

Piano di lavoro in vetro. Base durevole. Strisce di pelle sintetica per mantenere sempre umida la ceramica impastata.



Articolo No. 115-0000

Piastra Ceramica in Vetro

Dotazione: una spatola di agata, quattro strisce di pelle sintetica e una bottiglia di plastica.

Glass Ceramic Palette, per ceramisti abituati a lavorare la ceramica su un piano di lavoro in vetro. Utilizza delle strisce di pelle sintetica per mantenere l'umidità. L'acqua viene trasportata attraverso le strisce di pelle sintetica e si diffonde nella ceramica, creando un impasto omogeneo.



Articolo No. 115-0001

Strisce di Pelle Sintetica 4 pz.



Articolo No. 115-0003

Ricambio Piano di Vetro

MPF Evolution Master Ceramic Palette

Piastra per Ceramica Master Evolution: Piano di lavoro in vetro. Strisce in pelle sintetica per conservare l'impasto della ceramica costantemente umida. Nascosta nel cassetto una piastra per gli stains.



Articolo No. 115-4000

Evolution Master Ceramic Palette: Nera

In dotazione: una spugna, le strisce sintetiche, un rivestimento in nylon e un pennello stain.

Evolution Master Ceramic Palette, una piastra con un design sagomato ed elegante.

La forma ergonomica facilita i movimenti e rende comodo l'accesso ai materiali ceramici impastati.

Articolo No. 115-4100

Evolution Master Ceramic Palette: Bianca

Articolo No. 115-4001

Ricambio rivestimento di Nylon Evolution

Articolo No. 115-4005

Ricambio Spugna Assorbente Evolution

Articolo No. 115-4003

Strisce Sintetiche Evolution, 4/pk

Articolo No. 115-4006

Ricambio Piatto di Vetro Evolution

Articolo No. 115-4101

Ricambio Piatto di Vetro Bianco Evolution

MPF Stain & Paste Opaque Palette

Soluzione geniale per dare lunga conservazione a stain e opachi in pasta. Struttura di plastica solida e durevole. Coperchio a chiusura.



Articolo No. 115-5000

Piastra Stain/Opaco, Nera

Unica, angolata, step-type design della piastra, la Stain & Paste Opaque Palette permette un facile accesso ai prodotti. I pozzetti hanno una forma allungata verso il basso in modo che la miscela di materiale si depositi mantenendo la cremosità e bloccando fuoriuscite. Il coperchio, è a chiusura e frena l'asciugatura e la contaminazione della pasta. Uno schema per segnare i colori aiuta a catalogare i prodotti.



Articolo No. 115-6000

Piastra Stain/Opaco, Bianca

MPF Comp Tray

Raffinata soluzione per conservare i dispositivi per il composito. Piastra antiaderente in silicone per gli stain. Inserti intercambiabili. Spugna per la pulizia.



Articolo No. 115-9000

MPF Comp Tray

Dotazione: due piastre in silicone per gli stains e due spugne sintetiche. MPF Comp Tray è realizzata da un elemento in poliuretano intarsiato, fresato con un modello strutturato sulla sua superficie e che permette la perfetta adesione al materiale composito. Dotata con una piastra antiaderente in silicone per gli stains e una spugna per pulire gli strumenti mentre si lavora. L'inserto può essere posizionato su entrambi i lati per rendere confortevole l'utilizzo sia a tecnici di mano sinistra che destra.

Articolo No. 115-9001

Ricambio Piastra Silicone per gli Stains

Articolo No. 115-9002

Ricambio Spugna Sintetica

Articolo No. 115-9003

Ricambio Lastra Poliuretano

MPF CAD Artistry Palette

Controllo dell'umidità e della densità del materiale ceramico. Doppio piano di lavoro. Tecnologia CAD-CAM.



Articolo No. 115-7000

CAD Artistry Palette


dotazione: una spugna, un rivestimento in nylon e le strisce assorbenti sintetiche.

La CAD Artistry Palette è una piastra che consente due modi di impastare la ceramica e mantenere l'umidità e la densità. I due piani di lavoro sul piatto in ceramica consentono di impastare con l'acqua o con il liquido in contemporanea.

Scegli se lavorare su un rivestimento in nylon o utilizzando le strisce sintetiche. La piastra ha undici pozzetti per conservare i stain preferiti.


Questa piastra dà certamente una perfetta soluzione ai ceramisti con CEREC/IN-LAB e la tecnologia CAD-CAM.

MPF Accessories

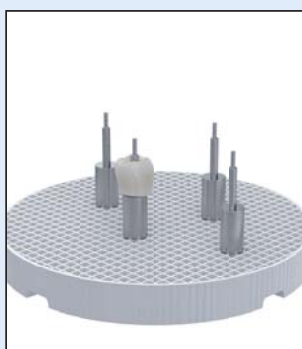

Articolo No. 114-0000

Honey Comb Tray Implant Metal Base a nido d'ape per impianti, pin in metallo.

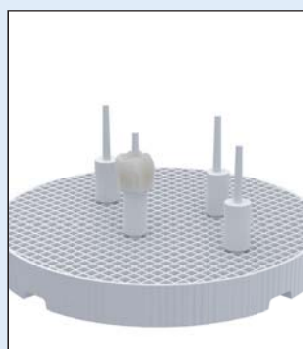

Articolo No. 114-3000

Honey Comb Tray Implant Ceramic - Base a nido d'ape per impianti, pin in Ceramica.



Articolo No. 114-4000

Honey Comb Tray Veneer Ceramic - Base a nido d'ape rialzata per Veneer.



Articolo No. 105-1000

Zir brush kit - Pennelli per la colorazione dello zirconio prima della sinterizzazione.



Articolo No. 150-0001

MPF Veneer & Crown Stabilizing Pasta provvisoria adesiva per tenere bloccate al modello veneer, corone in metallo, in ceramica e in composito. Brucia senza lasciare residui.



Articolo No. 151-0000

Rainbow Drops - Colori traccianti di grande intensità cromatica per ceramica e liquidi, bruciano senza lasciare residui.



Articolo No. 152-0000

Crown Holder - Strumento per tenere le corone e le faccette durante il lavoro, non le crepa e non le sporca.